

ひざ下全体をエアーの力でギューツとしぼり上げる。

THRIVE



(C) ベージュ



(BR) カブチーノ



(R) レッド

Air
Foot massager



わずらわしい着脱が不要だから、便利にエアーマッサージ!

足のマッサージ、疲れた瞬間に楽になる。

杉山 愛



Air
フットマッサージャー
MD-8700

エアバッグでググッと絞り込んでマッサージ。

Air
Foot massager



⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください

◎医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する
 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人 (倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人
【守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります】

●使用前に必ずエアバッグ部の張地が破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)
【守らないとけがや感電のおそれがあります】

◎次の人は使用しない
 ●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
【症状を悪化させるおそれがあります】

◎次のようなときは使用しない
 ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき
【体調不良をおこすおそれがあります】

●子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない ●子供に本製品で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない
【事故やけが、故障のおそれがあります】

●絶対に分解や修理、改造をしない
【発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります】




使い過ぎ、
切り忘れ防止
10分
オートタイマー

電気代の
目安(1ヶ月)
10円
1日30分使用

◎エアバッグ部は取り外しできません

新電力料金目安
単価27円/kWhで計算

お好みによって選べる3つのマッサージコース。
強さも3段階で切り替え可能。

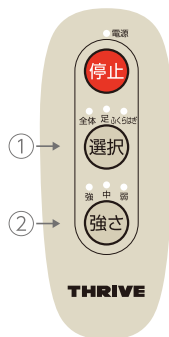

- ① **選択/全体**
すべてのエアバッグが効果的に脚全体をとらえて動作するコース。
- ① **選択/足**
足を中心にエアバッグが効果的に動作するコース。
- ① **選択/ふくらはぎ**
ふくらはぎを中心にエアバッグが効果的に動作するコース。
- ② **強さ/強・中・弱**
お好みに合わせてエアの強さが選べます。



ファスナーが付いているのでスムーズに足を出し入れできます。



基本



軽量設計。グリップが付いているので、持ち運びに便利です。



傾けて使用できます



高さ 約43cm
奥行 約43cm



幅 約41cm



仕様
 ■販売名:フットマッサージャーMD-8700 ■医療機器認証番号:226AKBZX00098000 ■一般の名称:家庭用エアマッサージ器 ■定格電圧:AC100V ■定格周波数:50/60Hz ■定格入力:25W ■定格時間:20分 ■エア圧力:60kPa以下 ■外形寸法:幅約41cm×奥行約43cm×高さ約43cm ■質量:約4.4kg ■電源コード長さ:約2m ■材質:本体:ABS樹脂/ポリエステル、エアバッグ部:ナイロン(外カバー)、ポリエステル(内カバー) ■医療機器製造販売業:大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新東町2番38号 ■医療機器製造販売業許可番号:27B2X00055 ■標準価格29,800円(税別)

お求めは当店どうぞ……

製造販売元
大東電機工業株式会社
 〒577-0026 大阪府東大阪市新東町2番38号

●商品のお買い物、取り扱い方法、修理などのお問い合わせはお客様ご相談センター 受付時間: 9:00~17:00(祝日を除く月~金)
 ナビダイヤル **0570-064-762**
 ◎ナビダイヤルがご利用できない場合
TEL.06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

●製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
 ●製品の色は印刷物ですので、実物とは色が若干異なることがあります。
 ●製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。
 ●ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

写真、イラストはイメージです。キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。