

保証書

持込修理

つかみもみマッサージャー MD-460

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間
お客様	
フリガナ	
お名前	様
住所 〒	
電話番号	
販売店	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことを約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

P14の無料修理規定をご覧ください。

製造販売元

大東電機工業株式会社


〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38

保管用

保証書付

つかみもみマッサージャー MD-460

取扱説明書

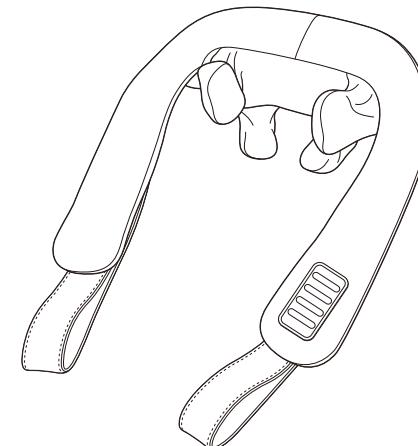

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
 - 血行をよくする
 - 筋肉の疲れをとる
 - 筋肉のこりをほぐす
 - 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- 一般家庭で使用すること

もくじ

● 安全上のご注意	1 ~ 4
● 各部の名称	5
● ご使用の前に	6
● 使いかた	7 ~ 8
● 使用例	8
● 使用上のご注意	9
● お手入れについて	9
● 保管について	9
● 故障かなと思ったら	10
● 愛情点検について	10
● 仕様	11
● アフターサービスについて	11 ~ 12
● メモ	13
● 無料修理規定	14
● 保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



◎記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



次のはは使用しない。

医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)症状を悪化させる原因になります。

マッサージ以外の目的には使用しない。また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。
事故やけがの原因になります。

強く押しつけて使用しない。
皮膚や筋肉を痛める原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。
事故やけがの原因になります。

安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。
事故やけがの原因になります。

子供には本体の上に乗らせたり遊ばせたりしない。
事故やけがの原因になります。

動作中にもみボールや、つかみアームを握ったり、手を入れたりしない。
事故やけがの原因になります。

〈無料修理規定〉

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターに依頼してください。
- ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P12のお客様ご相談センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
- (二) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
- (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - (ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
- 本書は国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP11をご覧ください。

 禁止	<p>本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードやACアダプター、器具用プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードやACアダプター、器具用プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>付属以外のACアダプターで使用しない。 また、付属のACアダプターで他の電気製品を使用しない。 発熱や発火、感電、けが、故障の原因になります。</p>
	<p>電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ACアダプターに巻きつけたりしない。また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。 火災の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>機器が故障したり、布力バーが破れた場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡する。ACアダプターや電源コードが破損した場合は危険ですのでお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに交換の依頼をする。 機器は改造しない。 火災や感電、けがの原因になります。</p>
 強制	<p>医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38°C以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血压変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしよう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の事故や体調不良をおこす原因になります。 <p>使用前に必ず布力バーが破れていないか確認する。どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。 けがや感電の原因になります。</p>
	<p>ACアダプターは交流100Vで使用する。 火災や感電の原因になります。</p>
	<p>器具用プラグやソケットは定期的に掃除する。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。</p>

安全上のご注意

！ 注意



禁止

次のようなときは使用しない。
● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき
体調不良をおこす原因になります。

食前、食後の1時間は使用しない。
体調不良をおこす原因になります。

他の治療器具と同時に使用しない。
体調不良をおこす原因になります。

使用中は眠らない。
事故やけがの原因になります。

肌の弱い人は素肌で使用しない。
けがややけどの原因になります。

施療部位にアクセサリーなどの硬いものをつけて使用しない。
機構部に接触してけがの原因になります。

落としたり、強い衝撃をあたえない。
事故やけが、故障の原因になります。

二人以上で同時に使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。
変色、変形の原因になります。

使用中にACアダプターや器具用プラグを抜かない。
けがの原因になります。

水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。
感電やショート、故障の原因になります。



水場使用禁止

浴室など湿度の高い場所では使用しない。
感電やショート、故障の原因になります。



強制

1回の使用時間は10分以内にする。
また、一箇所への連続使用は5分以内にする。
1日の使用時間は30分以内にする。
長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。

はじめは短い時間で使用する。
強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。

使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。
事故や体調不良をおこす原因になります。

お客様ご相談センターのご案内

製品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

製品のお取り扱い方法、修理などご相談は

フリーダイヤル

0120-064-762

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、IP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-5110

FAX 086-722-3874

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】
都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

仕様

販売名	つかみもみマッサージャー MD-460
医療機器認証番号	306AHBX00001000
医療機器の種類	管理医療機器
一般的な名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 20W
ACアダプター	IVP1200-2000P
定格時間	20分
オートタイマー	約10分
もみ回数	速 約14回/分 遅 約10回/分
外形寸法	幅 約37cm×奥行 約39.5cm×高さ 約12.5cm
質量	約1.45kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	本体:ポリエスル 布カバー:ナイロン
付属品	ACアダプター
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

● 保証書(裏表紙)

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

● 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。

● 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 補修用性能部品の最低保有期間

弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。

(ただし、縫製部品は除きます)。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● その他ご不明な場合


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。


 強制	使用後は電源ボタン(①)で動作を止め、もう一度電源ボタンを押して電源ランプを消灯させたのち、ACアダプターをコンセントから抜く。 本品で遊ぶことがないよう子供を監視する。 子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。
	ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たず、必ずACアダプターを持って引き抜く。器具用プラグをソケットから抜くときは電源コードを持たず、必ず器具用プラグとソケットを持って引き抜く。 感電やショート、故障の原因になります。
	故障が見つかったら、すぐに使用を止め、ACアダプターをコンセントから抜く。 事故やけがの原因になります。
	使用後は電源コードのねじれをほどいて保管する。 断線やショートの原因になります。
 電源プラグを抜く	使用時以外はACアダプターをコンセントから抜く。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でACアダプターにふれない。 感電ややけどの原因になります。
	停電のときは、ACアダプターをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。

各部の名称


本体

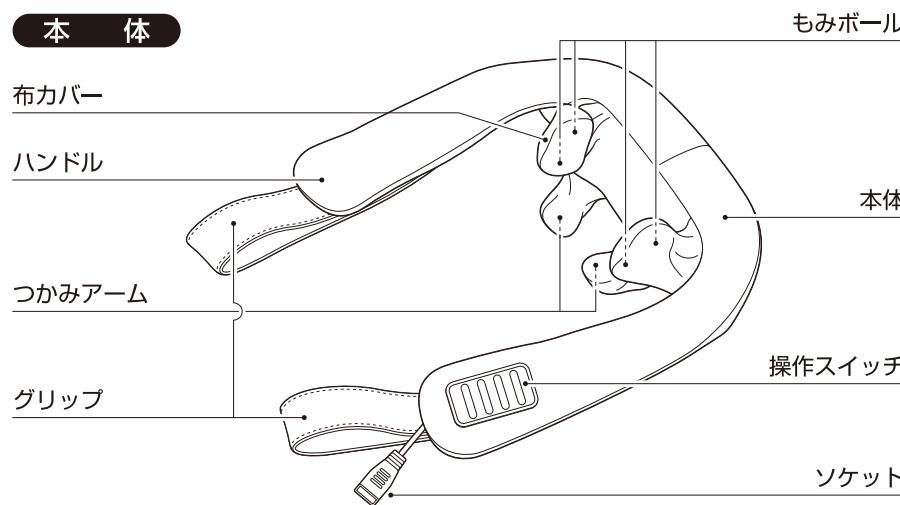

操作スイッチのボタンは、中央がボタン部、両サイドが表示部です。
動作させるには中央部を押してください。

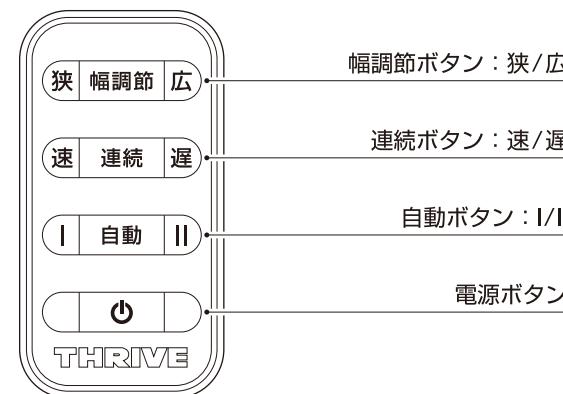

付属品

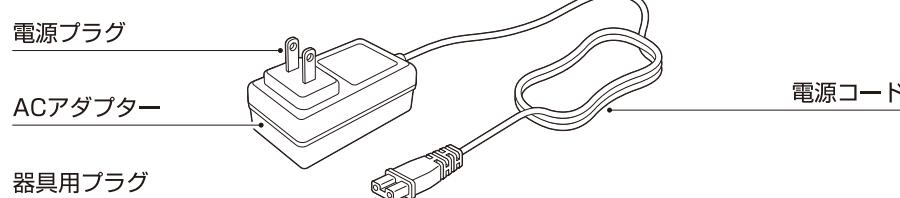

●付属品は同梱されているものをお使いください。

故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。

症 状	調べるところ
●布カバーがする音 ●マッサージ動作時の音	●構造上のもので機能などに影響はありません
●動作しない、動作が止まる	●電源ボタンのランプが点灯していますか ●ACアダプター、器具用プラグが抜けていませんか ●オートタイマーが働き停止状態になっていますか ●負荷をかけ過ぎていませんか

症 状	直し方
●連続使用時にマッサージが止まる	●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(2時間程度)から再度動作を確認してください

機器に異常音や動作しないなどの異常や故障が発見された場合は、ただちに使用を中止してください。ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	このような症状はありませんか。 ● こげくさいにおいかがする ● 電源コード、ACアダプターが異常に熱い ● 電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする ● その他異常がある	 故障や事故防止のため使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。
--	---	--

使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などの薬品を接触させないでください。
化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間あてないでください。
生地の変色や劣化の原因になります。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。
生地が変色する原因になります。

お手入れについて

柔らかい乾いた布でふき取ってください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき、仕上げに乾いた布で水分をふき取ってください。
お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しないでください。
変色・変形の原因になります。


保管について

- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- しばらくご使用にならないときはカバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- 電源コードはねじれをほどいて保管してください。


ご使用の前に

使用前に必ず布カバーが破れていないか確認し、
破れがあるときはただちに使用を中止してください。

- 布カバーを外した状態や破れた状態で使用しないでください。
破れた場合は使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリーなどの硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- 器具用プラグをソケットに差してください。(抜け落ちないよう確実に接続する)
- ACアダプターをコンセントに差してください。(抜け落ちないよう確実に接続する)
電源ボタンが白色に点灯しスタンバイモードになります。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。

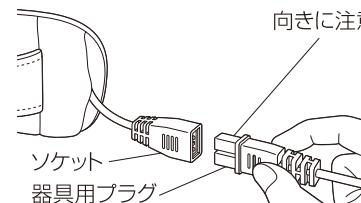


器具用プラグの向きに注意して
ソケットに差し込んでください。
(器具用プラグの凹とソケットの凸を合わせてください)

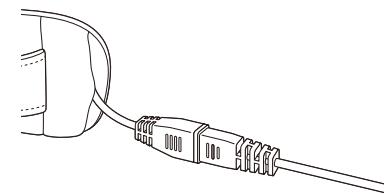


確実に根元まで差し込んで
使用してください。
故障、破損の原因になります。

本品を持って首/肩にセットする際は、図1で示したハンドル根元にある硬い部分を持つて行ってください。
ハンドルの柔らかい部分を持って行うと、重みで頭部に本体が当たり、事故やけがの原因になります。

(図1)

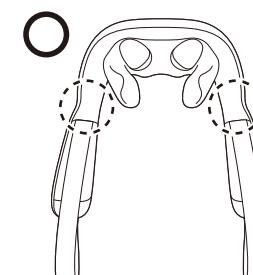

ハンドルの根元を持つ
(裏側から見た図)

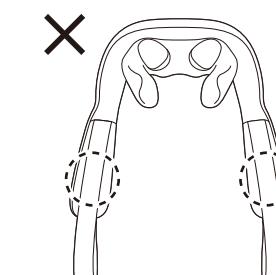


ハンドルの先端や真ん中は持たない
(裏側から見た図)

持ちかた



使いかた

本品は、もみボールとつかみアームの動作により、首・肩をはじめとした各部位を「つかみもみ」マッサージします。

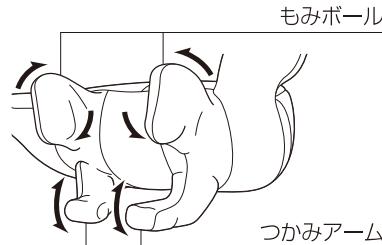

1. 連続

ボタンを押すと[連続モード]を開始します。

ボタンを押すごとに[速] [遅]の順番に切り替わり、一定の速度でマッサージします。



2. 自動

ボタンを押すと[自動モード]を開始します。

ボタンを押すごとに[自動I] [自動II]の順番に切り替わります。



自動I………一定速度のもみ動作に加え、小刻みなリズム動作をしながらマッサージを行います。

自動II………一定速度のもみ動作に加え、ゆっくりとしたリズム動作をしながらマッサージを行います。


3. 幅調節

[連続モード] [自動モード] 使用中にボタンを押して、もみボール、つかみアームの幅調節が可能です。

ボタンを押すごとに[狭] [広]が切り替わり、もみボール、つかみアームが移動します。

お好みの幅に調節してご使用ください。

●右図のように、もみボールとつかみアームの幅が変化します。

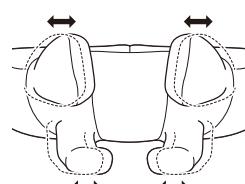

4. マッサージを終了したいときは、電源ボタン  を押してください。動作が止まります。

もう一度電源ボタンを押すと電源ランプが消灯し、電源OFFになります。
(電源ランプが点灯した状態で約2分間ボタン操作を行わないと、電源ランプは消灯します)。

5.ACアダプターをコンセントから抜いてください。

6.器具用プラグをソケットから抜いてください。

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。

使用例



グリップを持って使用



壁などに当てて使用



椅子の背もたれなどに当てて使用



本体を持って使用



ハンドルを持って使用

●首・肩で使用の場合、もみボールを首に、つかみアームを肩に当ててください。

●グリップの向きや力加減を調整することで最適な位置を決めてください。

●頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。